

# ワイヤレス トークシステム

あら！  
耳が不自由なこと  
忘れてたわ！

人との会話が聞きづらくなった…  
会話に自信が持てなくなった…など、  
不自由をお感じの方に朗報です。

離れた相互の会話が可能です。(30m程度)  
多人数の会話、打ち合わせにも効果を発揮します。  
デザインも美しく身体にフィットします。  
福祉電波 (169MHz) を使用。



無線で親機と子機をつなぎますので、普段の生活に近い暮らしが可能です。



5色のバリエーションから  
お選びいただけます。




## 便利なグループトークシステム



ミーティング、研修などで利用者の相互会話が可能です。  
今までにない便利さを実感できます。

## 集団補聴ができます

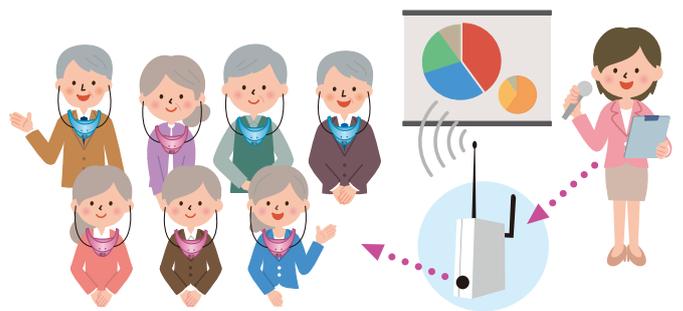

講習会などで講師のお話が直接イヤホンに届きます。  
はっきり聞こえますので、内容が良く解ります。

## 訪問介護の方などと



ヘルパーさんとの会話がスムーズになりますので、お互いの意志を伝えやすくなります。

## 診療・診断などで



病院の先生や自分の声もよく聞こえますので症状を伝えやすく、より正しい診察が受けられるようになります。

## テレビの視聴などで



テレビを見ながら会話ができますので暮らしが潤います。また、テレビの音量で他の人に迷惑をかけることもありません。

### ■ベースユニット(親機)の仕様 GT-B1

#### 【電源】

2電源方式(ACアダプター、単3電池:4本)  
添付の充電電池を使用時:約11時間使用可能(4人使用時)

#### 【子機の音声ミキシング放送機能】

最大6台の子機のマイク音声を受信  
ミキシングしてFM電波(169MHz)で子機に送信

#### 【マイク】φ6.3モノラル端子

(マイクを接続してグループ全体に音声を伝達可能)

#### 【外部入力】φ3.5モノラル端子

(TVの音声、緊急放送などの外部音声を入力可能)

#### 【外部出力】φ3.5モノラル端子(受信のモニターが可能)

【電源ランプ】緑(電池良好)赤点滅(電池残量少)赤(電池不足・要充電)

【受信表示ランプ】6ch(受信時ブルーLEDが点灯)

【チャンネル電源スイッチ】6個(使用しないチャンネルの電源を切断可能)



### ■トークユニット(子機)の仕様 GT-T1

#### 【電源】

単3電池:1本  
添付の電池を使用の場合

1回満充電時(約6.5時間使用可能)

聞くだけモード時(約14時間使用可能)

#### 【音量の調整範囲】

好みの音量に応じて簡単にボリューム調整が可能

#### 【マイク】内臓マイク

#### 【出力端子】

イヤホン差し込み口×2個(右耳用・左耳用)

市販のヘッドホン使用可能

【電源ランプ】緑(電池良好)赤点滅(電池残量少)赤(電池不足・要充電)

【受信表示ランプ】受信時ブルーLEDが点灯



●お問い合わせは

●販売店

代理店

**有限会社 アイアシステム**

〒132-0023 東京都江戸川区西一之江3-40-11

TEL 03-3674-5768 FAX 03-3674-5762

URL <http://www.eyearsystem.com>

製造元

Jumpers 株式会社

〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川 2-17-1